

# **GENOSS**<sup>TM</sup>

## **PTCA Balloon Catheter**

CTO



Catéter Globo PTCA CTO

Línea: Intervencionismo Vascular

**GENOSS**  
For Patients & Doctors

# GENOSS™

## PTCA Balloon Catheter



PTCA Catéter de GLOBO. Mejor fuerza de compresión de la punta final que otras. Gran capacidad de seguimiento con punta cónica suave. Diámetro de globo más pequeño (Ø 1,0 mm) para CTO.

### Recubrimiento hidrofílico

Este recubrimiento proporciona una gran trazabilidad y capacidad de cruce.

### Último perfil de entrada y globo más pequeño

Esto hace que el rendimiento de re envoltura sea excelente para una capacidad de re cruzamiento superior.

### Baja presión


El inflado preciso del globo esta asegurado por una presión controlada con una propiedad propiedad de baja presión.

### Propiedad mejorada de punta final para CTO

La punta cruzada de bajo perfil y cónica facilita el cruce de lesiones calcificados.

### Gran capacidad de empuje y rastreadibilidad

Éstos están garantizados por el hipotubo de revestimiento de PTFE combinado con biselado largo.

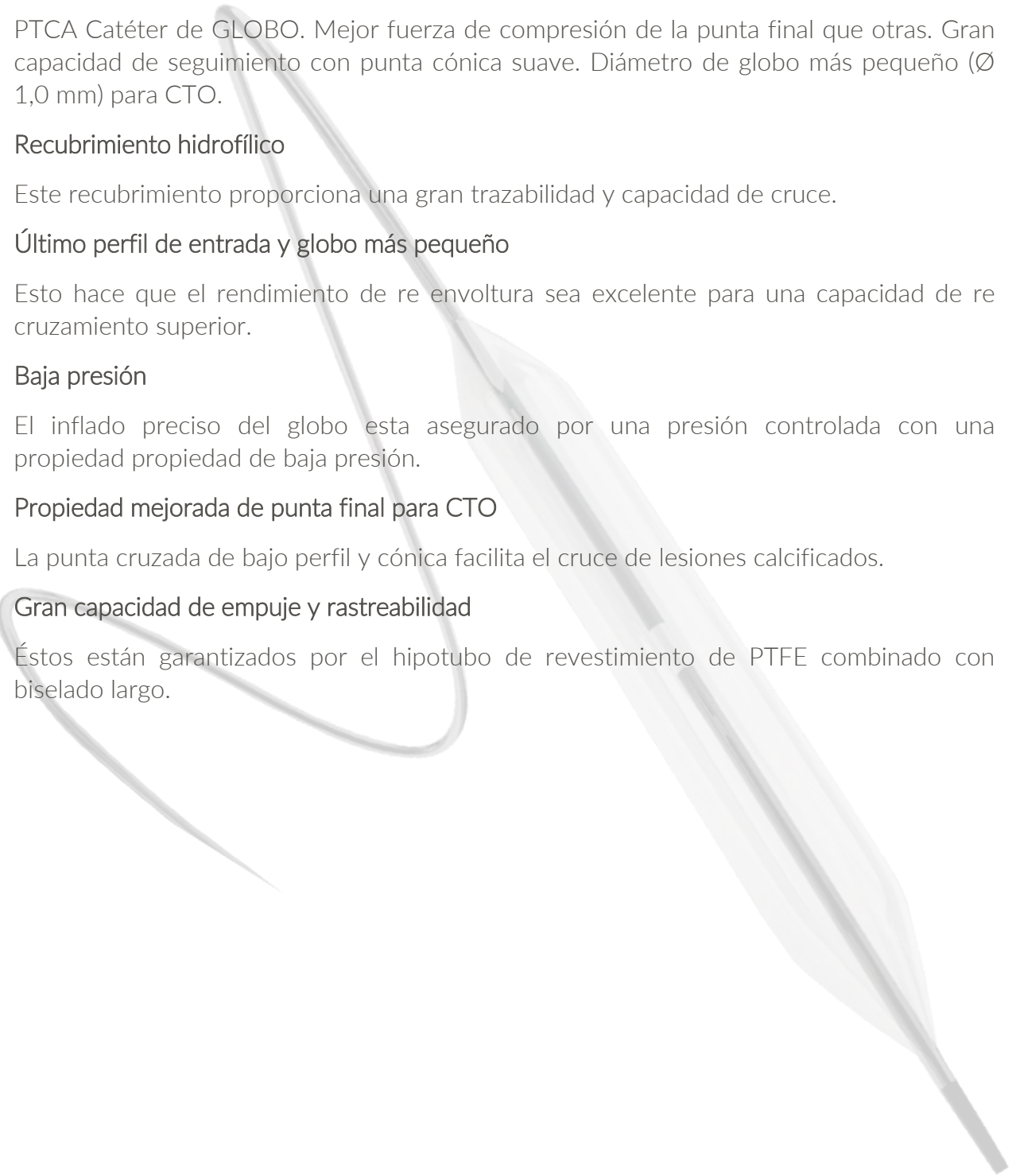

**GENOSS™**

**PTCA Balloon Catheter**

CTO



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

**MEDIKROM S.A. DE C.V.**


Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
[www.medikrom.mx](http://www.medikrom.mx) | [ventas@medikrom.mx](mailto:ventas@medikrom.mx)  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

**GENOSS**  
For Patients & Doctors

### Especificación

Eje distal	2.8Fr(0.92mm)
Eje proximal	2.0Fr(0.68mm)
Perfil de entrada de la lesión	0.017"(0.43mm)
Presión nominal	7 ATM(1.50mm)
Presión de explosión nominal	15 ATM(1.50mm)
Tipo globo	Globo no conforme
Plegado de globos	2 plegables
Mín. identificación del catéter guía	5Fr(0.056")
Máx. alambre guía OD	0.014"(0.36mm)
Tipo de catéter	Intercambio rápido
Longitud utilizable	1450mm
Duración	3 años desde la fecha de esterilización

### Cumplimiento


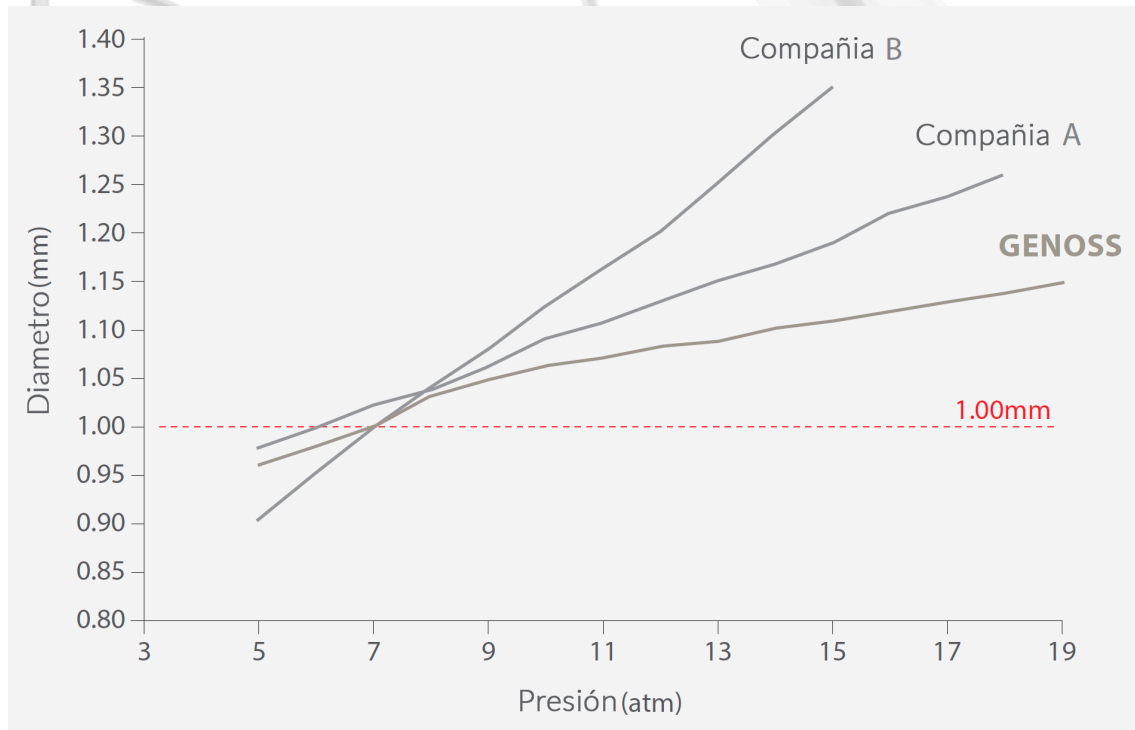


**GENOSS™**

**PTCA Balloon Catheter**

CTO

Fuerza de compresión de la punta final

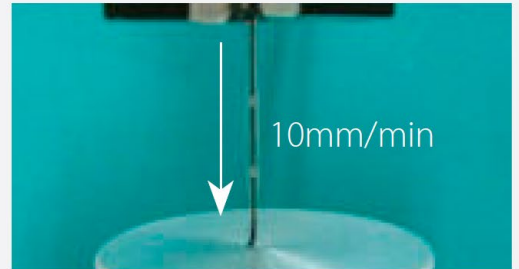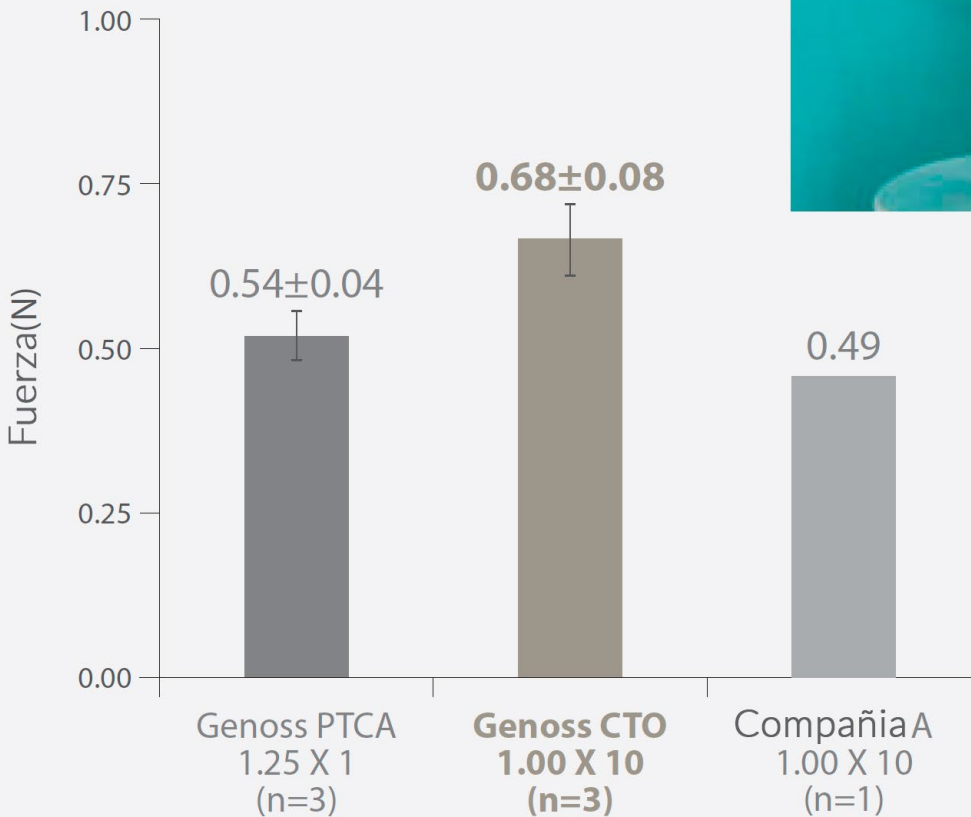



[linkedin.com/company/medikrom/](https://linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037  
55 1680 8851 | 777 145 3369