

antmed
Partner For Life

MEDIKROM
SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



imaStar

Línea: Inyectores Medios de Contraste
Angiografía | Hemodinamia | Fluoroscopia

antmed
Partner For Life

Sistema de administración de contraste con un cabezal para Angiografía, hemodinamia y fluoroscopia.

El inyector de contraste angiográfico ImaStar DSA Single Head Injector ANT000150 se utiliza para administrar dosis precisas de contraste al corazón. Permite realizar inyecciones de alta presión de forma rápida y precisa.

- Diseño inteligente
- Pantalla táctil a color
- Cabezal del inyector resistente al agua
- Características de seguridad
- Curva de presión en tiempo real
- Conexión con otros equipos de imagenología
- Comunicación por Bluetooth

Diseño inteligente

Reconocimiento del ángulo del cabezal del inyector para evitar operaciones incorrectas


Pantalla táctil a color

Se puede operar tanto en el quirófano como en la sala de escaneo.

La interfaz de usuario intuitiva resalta la información clave para que los usuarios completen la operación de forma independiente.

El control de doble pantalla facilita el cambio entre el quirófano y la sala de escaneo.

El cabezal de inyección se puede girar para adaptarse a los requisitos de operación en diferentes posiciones.

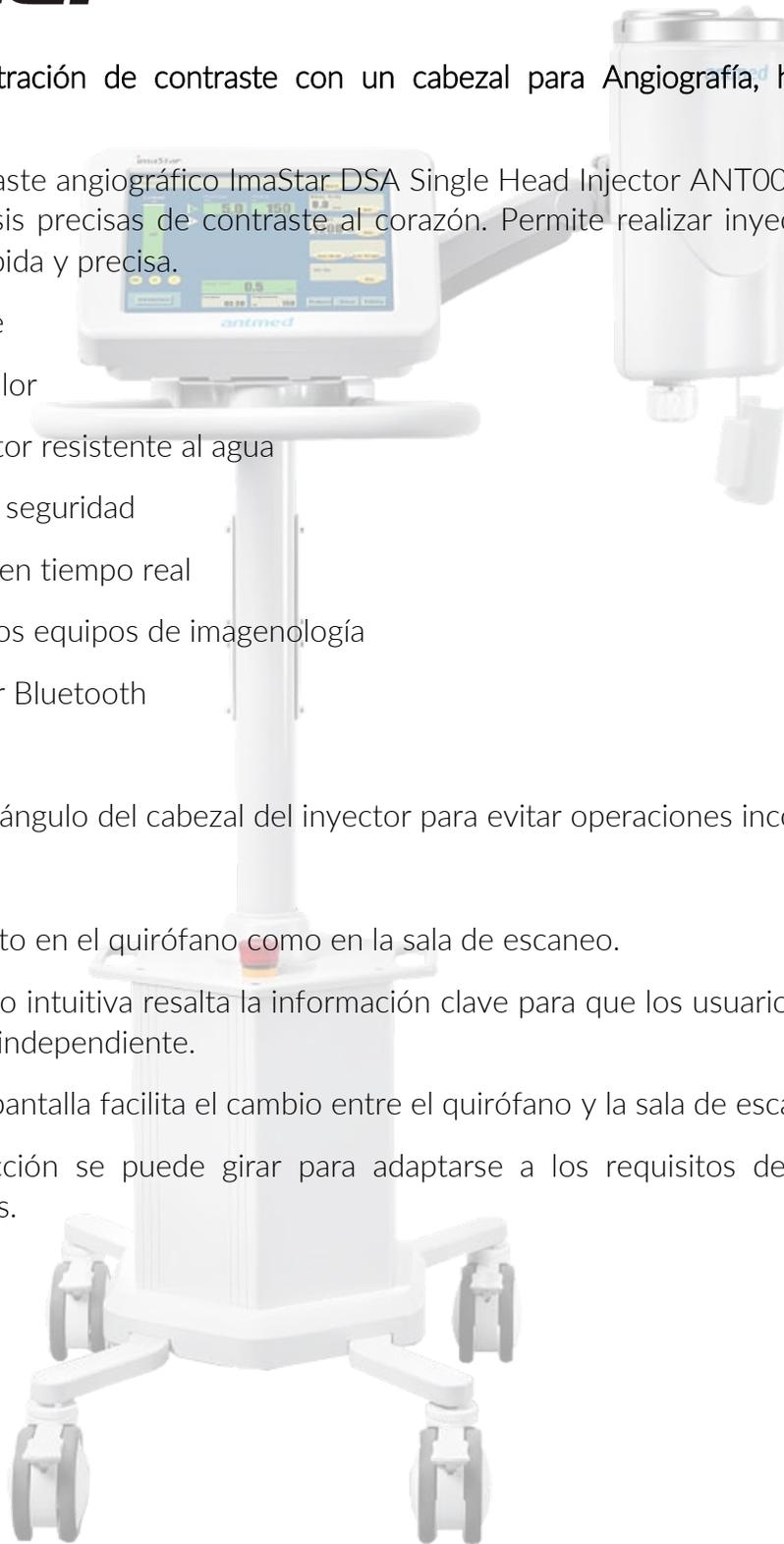



Sistema de administración de contraste con un cabezal para Angiografía, hemodinamia y fluoroscopia.

Cabezal del inyector resistente al agua

Diseño resistente al agua para minimizar los daños causados por fugas de contraste y solución salina.

Seguridad

Para garantizar la seguridad de la inyección, cuenta con una función de doble confirmación con avisos independientes para confirmar la purga de aire y el estado de la inyección lista antes de cada inyección.

Reduce automáticamente la velocidad de la inyección al acercarse al límite de presión.

La inyección se detiene al alcanzar el límite de presión. Alertas luminosas y sonoras.

Mantenedor de calor

Garantiza que el contraste se mantenga a la temperatura ideal.


Conexión a otros equipos de imagen

Conéctese a otros equipos de imagen para obtener imágenes mejoradas, utilizar el contraste de forma más eficiente y minimizar la radiación.

Sin batería

Evite tener que cargar la batería. Conéctelo directamente a la fuente de alimentación. Diseño inteligente

Reconocimiento del ángulo del cabezal del inyector para evitar errores de operación

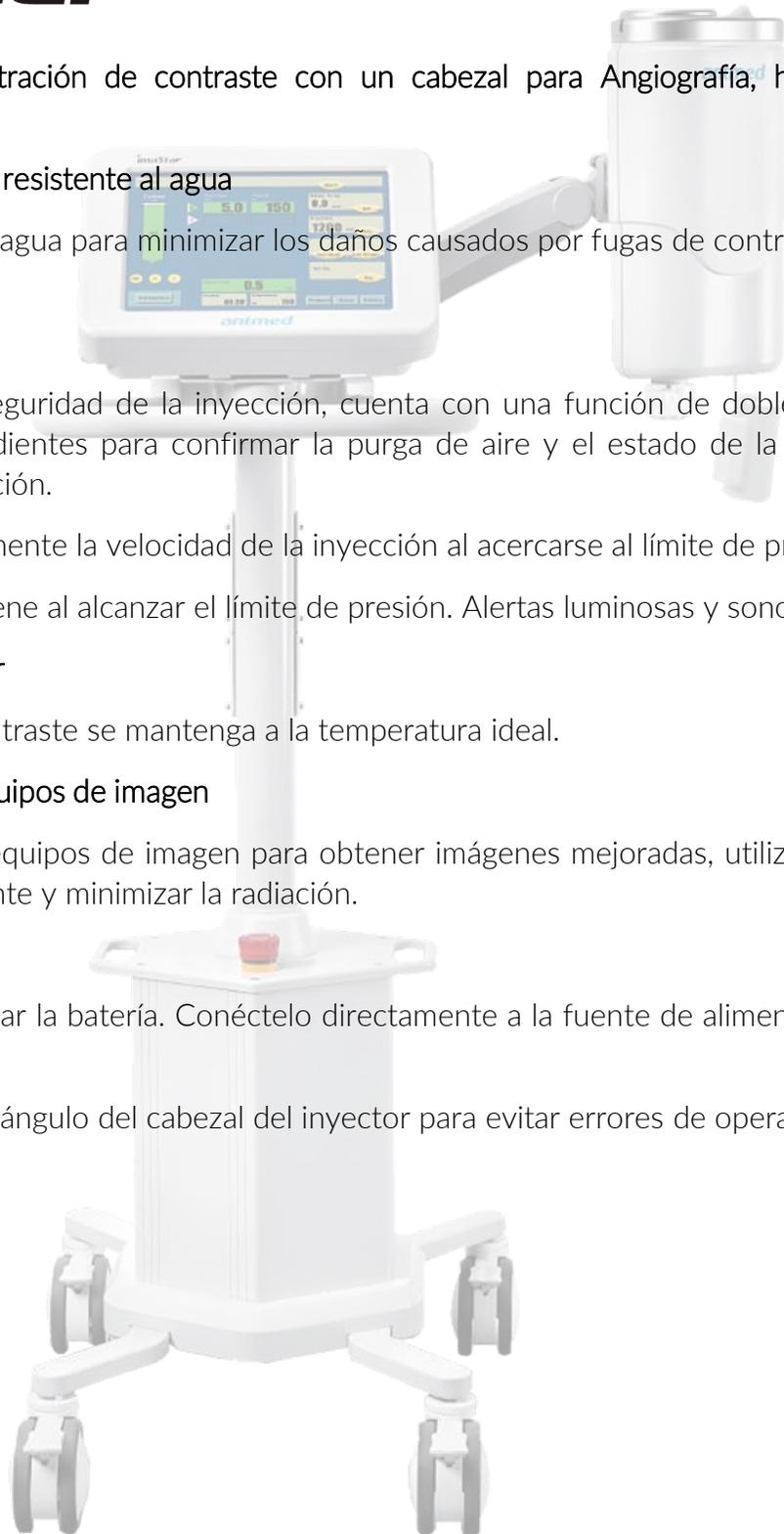

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851





Sistema de administración de contraste con un cabezal para Angiografía, hemodinamia y fluoroscopia.

Ventajas:

Ofrece un rendimiento fiable, una experiencia segura para el paciente y un precio asequible en el laboratorio de cateterismo.

Protocolo de inyección preestablecido: ayuda a aumentar la eficiencia y a mejorar la calidad de la imagen.


Reduce la cantidad de agente de contraste y la radiación.

Mayor impermeabilidad, lo que reduce la tasa de fallos del equipo.

Menor coste por paciente. Los inyectorores y los consumibles de jeringa son más económicos.

Diseño inteligente para alternar automáticamente entre la interfaz de llenado y la interfaz de inyección.

Conexión con otros equipos de imagenología como GE, PHILIPS, ZIEHM, NEUSOT, SIEMENS, etc.

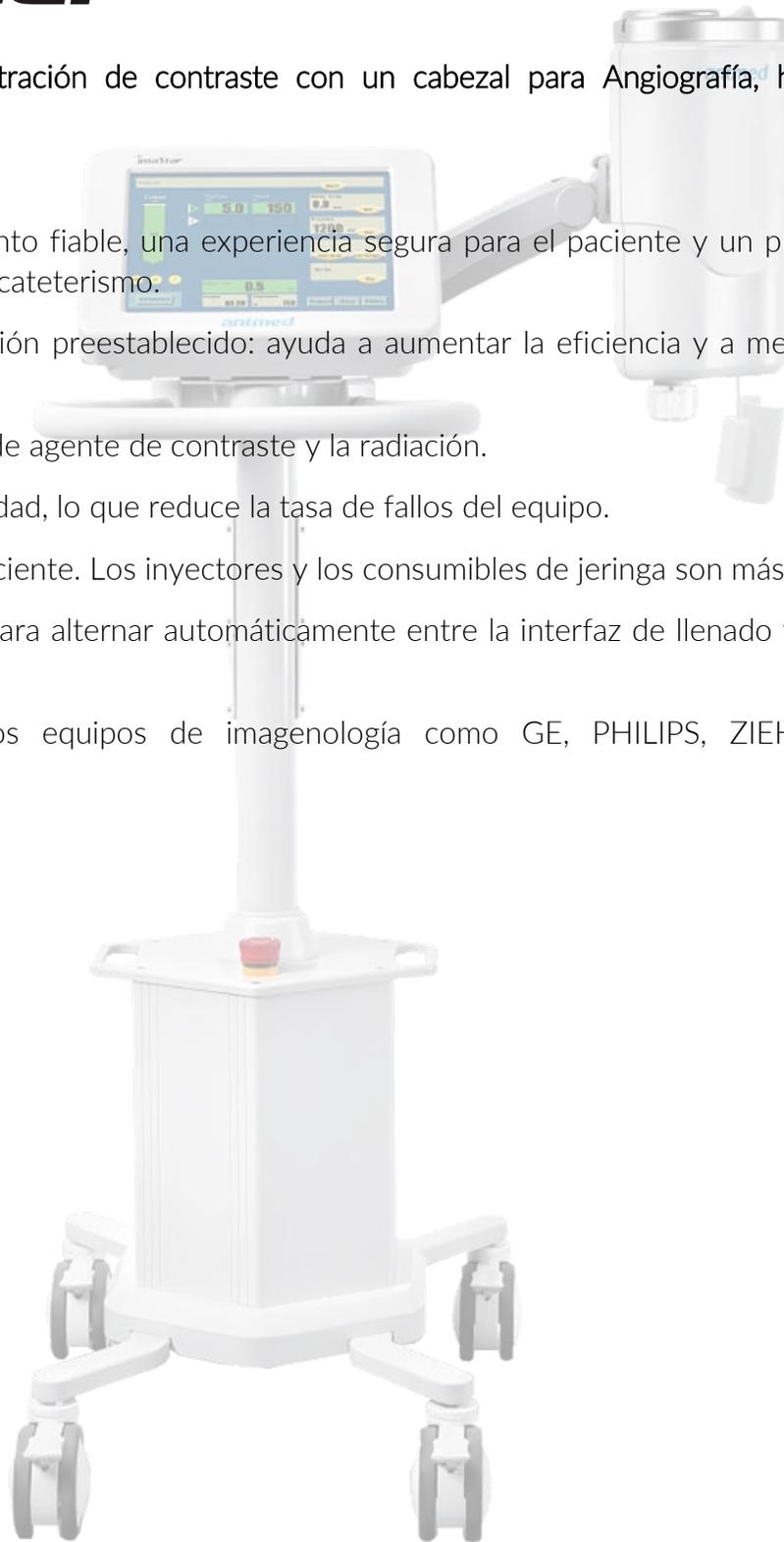

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851








ESPECIFICACIONES	
CARACTERISTICA	ESPECIFICACIÓN
Fuente de alimentación	100~240VAC, 50/60Hz, 500VA
Tasa de flujo	0.1~45ml/s
Límite de presión	1200PSI
Tasa de llenado automático	8.0ml/s
Tasa de Purga de aire	1.0~9.9ml/s
Velocidad de la varilla del pistón	9.9ml/s
Tiempo de elevación	0.1-9.9sec
Retraso de inyección	0.0-900sec
Retraso de Rayos X	0.0-900sec
Etapas	6
Programas de inyección	2000
Registros de inyección	2000
Volumen	1~150ml

Interfaz de usuario en varios idiomas



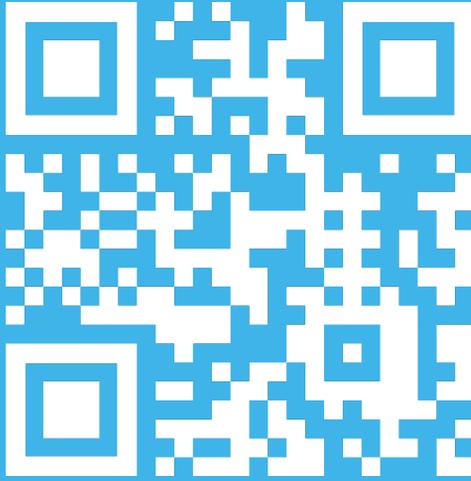

 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 215 8250

 56 2674 0020 | 777 388 4289
55 1680 8851 | 777 533 5037