

Consumibles | Inyectores MC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



medrad®

Línea: Consumibles Inyectores



AVA 500 SPAT ANGIO para inyector MEDRAD® Avanta


Equipo desechable para el sistema de administración de fluido, estéril y desechable. Diseñado específicamente para su uso en el entorno de la angiografía por rayos X. Manejan medios de contraste intravasculares radiopacos y varios volúmenes y flujos de agentes de lavado para su uso en procedimientos angiográficos intervencionistas y de diagnóstico realizados en cardiología, radiología y cirugía vascular. Dispositivo desechable para conectar el catéter angiográfico al dispositivo inyector multi paciente. El equipo estéril desechable para un solo paciente (AVA 500 SPAT Angio) está diseñado para usarse cuando no se necesita un transductor acoplable por el usuario. Utilícelo únicamente con el sistema de inyección de gestión de fluidos Avanta de Medrad.

- Tubo 46" diámetro: 0.110".
- Diámetro del tubo de 7": 0,145".
- Diámetro del tubo de 46": 0,145".
- Adaptador Luer - 3 uds.
- Clips - 2 uds.:
- Conector T-Y.
- Adaptador giratorio.
- Válvula de cierre.

INFORMACIÓN

MARCA	AVA 500 SPAT ANGIO MEDRAD®
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare

AVA 500 SPAT ANGIO para inyector MEDRAD® Avanta

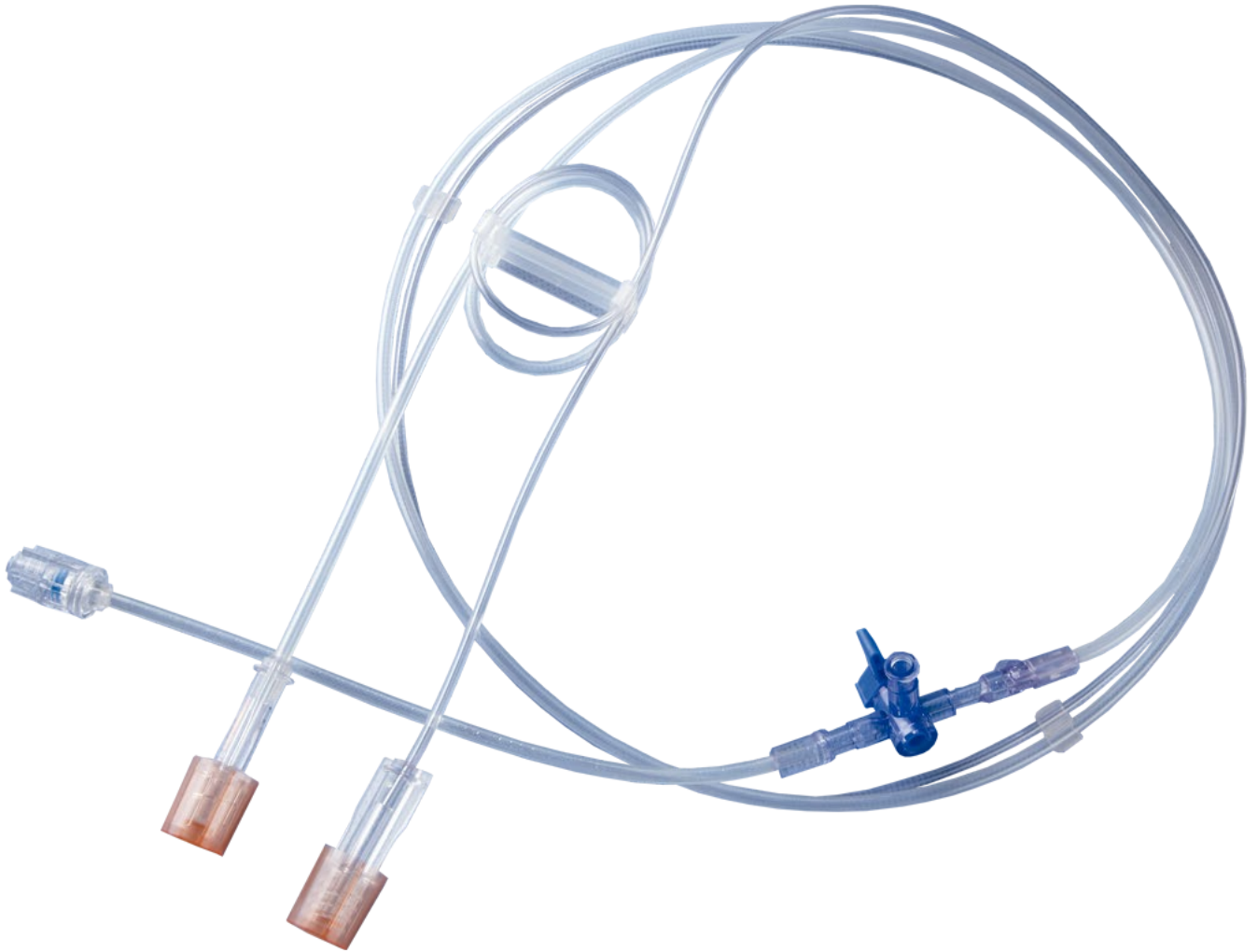

INFORMACIÓN

MARCA	AVA 500 SPAT ANGIO MEDRAD®
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



AVA 500 SPAT L para inyector MEDRAD® Avanta

Equipo desechable para el sistema de administración de fluido, compatible con transductor, estéril y desechable. Diseñado para manejar medios de contraste intravasculares radiopacos y varios volúmenes y flujos de agentes de lavado para su uso en procedimientos angiográficos intervencionistas y de diagnóstico realizados en cardiología, radiología y cirugía vascular. Dispositivo desechable para conectar el catéter angiográfico al dispositivo inyector multi paciente. Utilícelo únicamente con el sistema de inyección de gestión de fluidos Avanta de Medrad.

Tubo 59" diámetro: 0.110".

Diámetro del tubo de 7": 0,145".

Diámetro del tubo de 59": 0,145".


Adaptador Luer - 3 uds.

Clips - 2 uds.

Válvula de aislamiento de presión con puerto hemodinámico.

Adaptador giratorio.

Válvula de cierre.

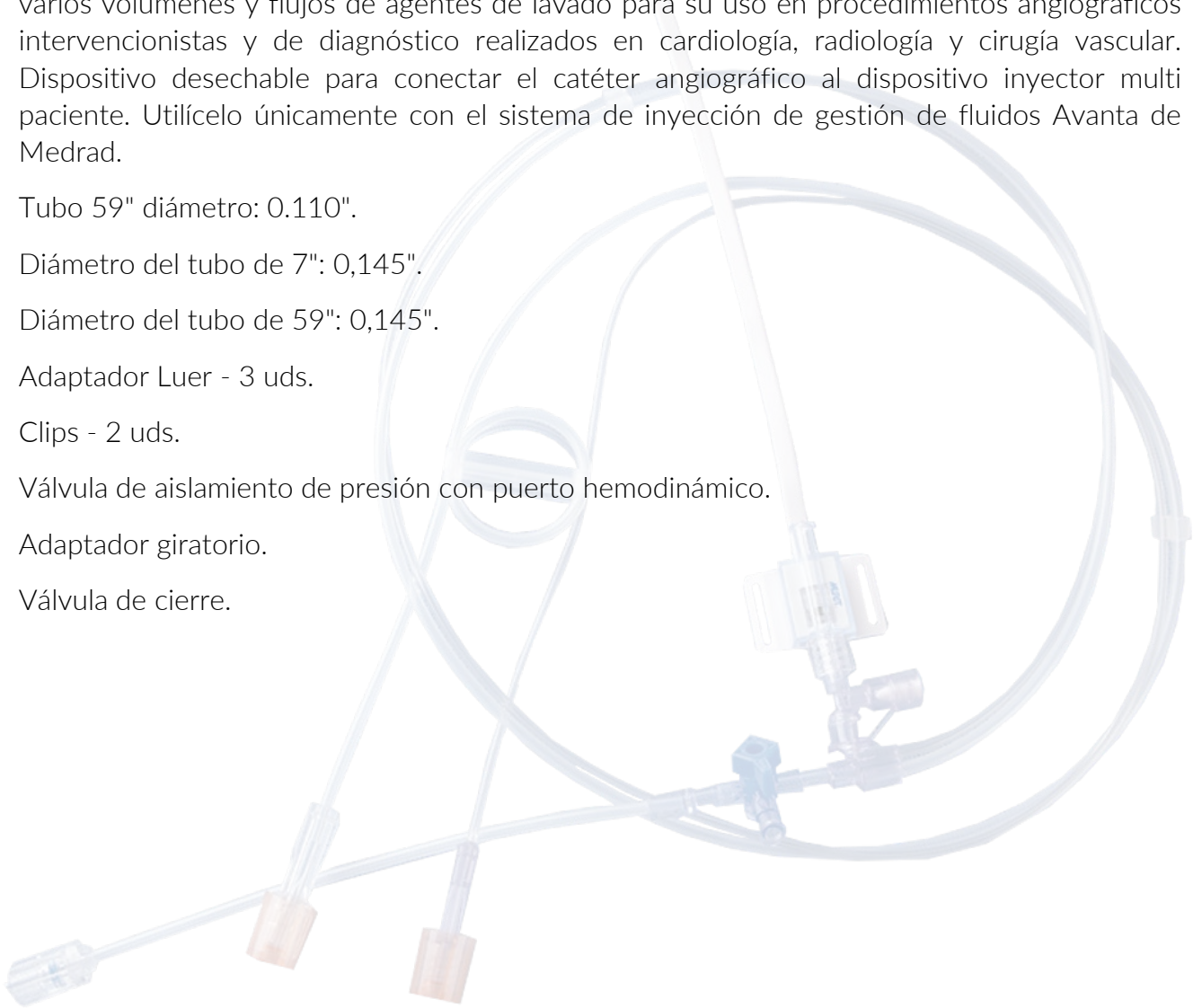

INFORMACIÓN

MARCA	AVA 500 SPAT LMEDRAD®
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare

AVA 500 SPAT L para inyector MEDRAD® Avanta



INFORMACIÓN

MARCA	AVA 500 SPAT LMEDRAD®
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Hand Controller AVA 500 HC

El AVA 500 HC es un controlador de múltiples pacientes (hasta 5 pacientes cuando se enfunda) y un dispositivo de un solo uso (1 paciente cuando está desenvainado) para el sistema de inyección de fluido Medrad® Avanta™. El controlador de mano receptivo permite un mayor control de flujo (en comparación con la inyección de mano) pero con la sensación de una jeringa de mano. Proporciona un mayor control sobre el volumen total entregado al permitir que el médico ajuste el suministro de contraste durante la inyección y controle el volumen total administrado al paciente.



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Avanta Multi-Patient Hand Controller
USAR CON:	Medrad® Avanta Fluid Management Injection System
FABRICANTE:	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Hand Controller AVA 500 HC



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Avanta Multi-Patient Hand Controller
USAR CON:	Medrad® Avanta Fluid Management Injection System
FABRICANTE:	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Jeringa Tri Pack 200 ML CTP-200-FLS

Jeringa de carga frontal de 200 ml con tubo de llenado rápido y tubo de paciente de 60" para usar con los sistemas de inyección Medrad Vistron CT, Medrad EnVision CT y Medrad MCT Plus, 50/caja de Bayer Healthcare CTP200FLS

Se utiliza para inyectores de medios de contraste CT para administrar el medicamento (agentes de contraste y solución salina normal de NaCl), mejorar las imágenes de escaneo y facilitar a los médicos la observación y localización de lesiones con mayor precisión.

Características

- OEM aceptado
- Esterilización con gas EO
- Látex Libre
- Presión máxima de 350 psi
- De un solo uso

Certificación

- CEISO 13485
- FDA-EE.UU.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



HJeringa Tri Pack 200 ML CTP-200-FLS



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Stellant®
USAR CON	Medrad Vistron CT, Medrad EnVision CT y Medrad MCT Plus
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CTP Single Syringe Kit
VOLUMEN	200 mL



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Jeringa Tri Pack SDS-CTP-QFT

Juego de jeringas de 200 ml, para inyección de material de contraste y soluciones, con tubo de llenado en forma de «J» y tubo conector de baja presión, específico para inyector Marca: Medrad, Modelo: Stellant Dual.



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Stellant®
USAR CON:	Medrad® Stellant® D CT Injection System
FABRICANTE:	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CT Single Syringe Kit
LONGITUD DEL TUBO:	60-Inch Patient Tubing with T-connector
VOLUMEN:	2 X 200 ml



MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Jeringa Tri Pack SSS-CTP-QFT

Kit de jeringa individual CT Medrad® Stellant® Tubo de baja presión de 60 pulgadas 200 ml
Para usar con el sistema de inyección Medrad® Stellant® Sx CT

- Método de llenado: tubo de llenado rápido.
- Conexión y desconexión rápida y sin alineación: ahorra tiempo y admite técnicas asépticas.
- Sistema automático de detección del émbolo - detecta y reacciona al estado de la jeringa: precargada, vacía o extraída.
- Émbolo sin pie: garantiza la alineación correcta del pistón-émbolo en todo momento.
- El cilindro ultratransparente permite una fácil detección de burbujas de aire.
- El indicador patentado Medrad® FluiDot® permite a los operadores detectar rápidamente la presencia de líquido.
- El tubo de cebado captura el desbordamiento de líquido para minimizar el goteo y la suciedad durante el cebado.
- Los conjuntos de transferencia mejoran económicamente la eficiencia de carga de fluidos.
- Complemento sugerido: Conjunto de transferencia de válvula de hisopo (SVTS).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Jeringa Tri Pack SSS-CTP-QFT



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Stellant®
USAR CON	Medrad® Stellant® Sx CT Injection System
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CTP Single Syringe Kit
VOLUMEN	200 mL



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.


Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit de jeringas para Sistemas de Inyección SSQK 65 / 115VS Bayer Medrad Spectris Solaris EP MR

Juego de jeringas desechable para el inyector Spectris Solaris de Resonancia Magnética, utilizado para los inyectores de medio de contraste de RMN para administrar el medicamento (agentes de contraste y solución salina Normal de NaCl), mejorar las imágenes de exploración, y facilitar a los médicos para observar y localizar lesiones con mayor precisión.

- 1-65ml&1-115ml Jeringas MR
- 1-Tubo en espiral en T de 2500 mm con una válvula de retención
- 1-Pico Grande de solución Salina, 1-Pico de Contraste Pequeño
- Estéril y desechable.
- 100% de ajuste
- OEM aceptado
- Esterilización con gas
- Libre de látex
- Presión máxima de 350psi
- Un solo uso

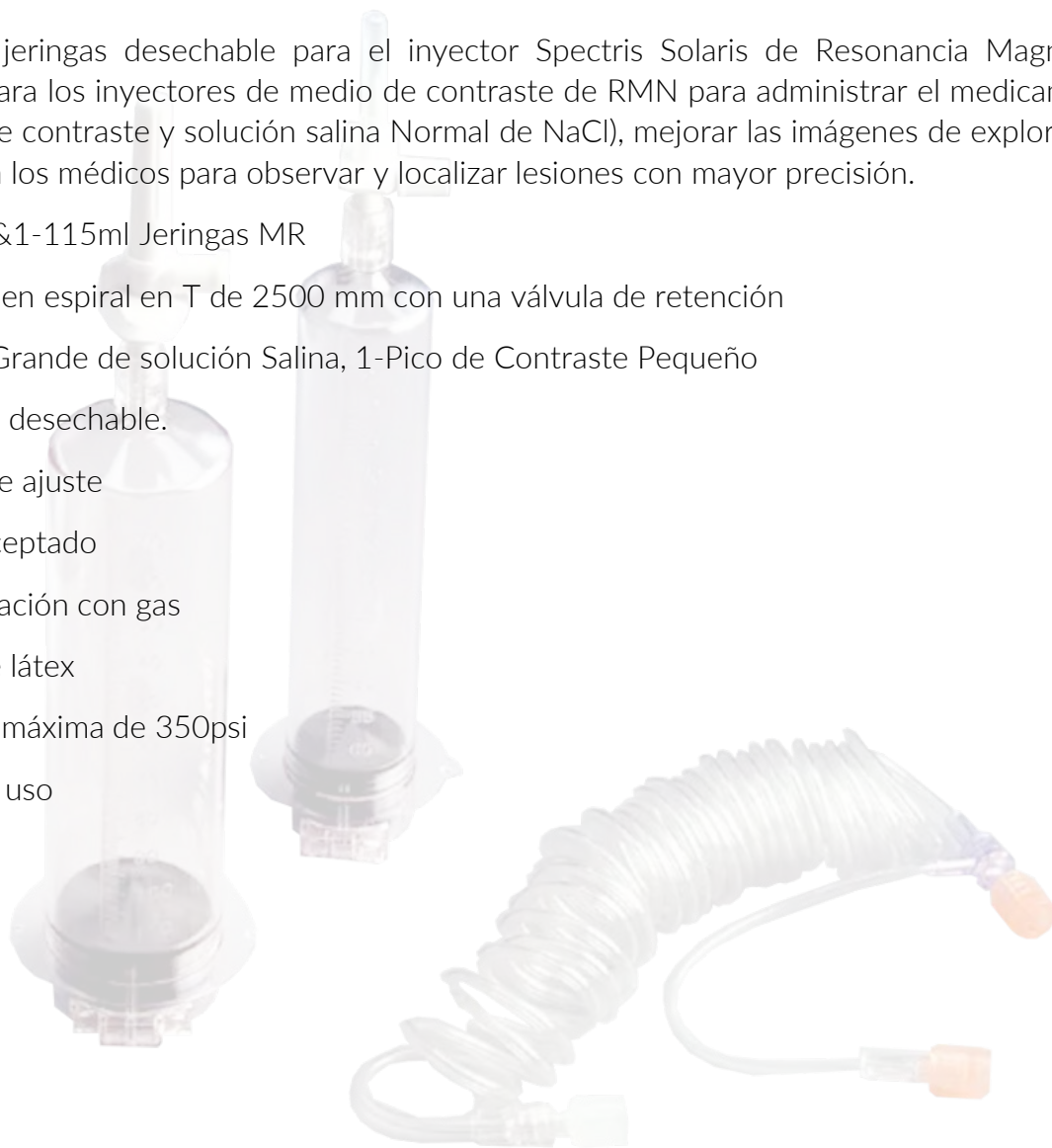

SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx

56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit de jeringas para Sistemas de Inyección SSQK 65 / 115VS Bayer Medrad Spectris Solaris EP MR



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Spectris Solaris® EP
USAR CON	Medrad® Spectris Solaris® series MR injection systems
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CT Dual Syringe Kit
LONGITUD DEL TUBO	96 Inch Low Pressure T-Tubing with Check Valve
VOLUMEN	65 ml / 115 ml



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit Jeringa 150 ML QFT 150-FT-Q

Jeringa estéril desechable de 150 ml de alta presión de alta calidad para inyectores de contraste Medrad Mark V, Mark V plus y Mark V provis, aplicable en los exámenes en laboratorios de cateterismo y angiografía, suites de radiología, centros de imágenes por tomografía computarizada y resonancia magnética, centros oncológicos, centros de salud para mujeres y más.

- Desconexión rápida, mayor visualización y mantenimiento reducido del inyector
- Reducción de la exposición a patógenos transmitidos por la sangre.
- Conexión con una mano de tubería de baja presión
- Entrega eficiente de contraste con diseño de cuello corto

Aplicación



Se utiliza para inyectores de medios de contraste DSA/angiografía para administrar el medicamento (agentes de contraste y solución salina normal de NaCl), mejorar las imágenes escaneadas y facilitar que los médicos observen y ubiquen las lesiones con mayor precisión.

Características

- OEM aceptado
- Esterilización con gas EO
- Látex Libre
- Presión máxima de 350 psi
- De un solo uso

Certificaciones

- CE
- ISO 13485
- FDA-US

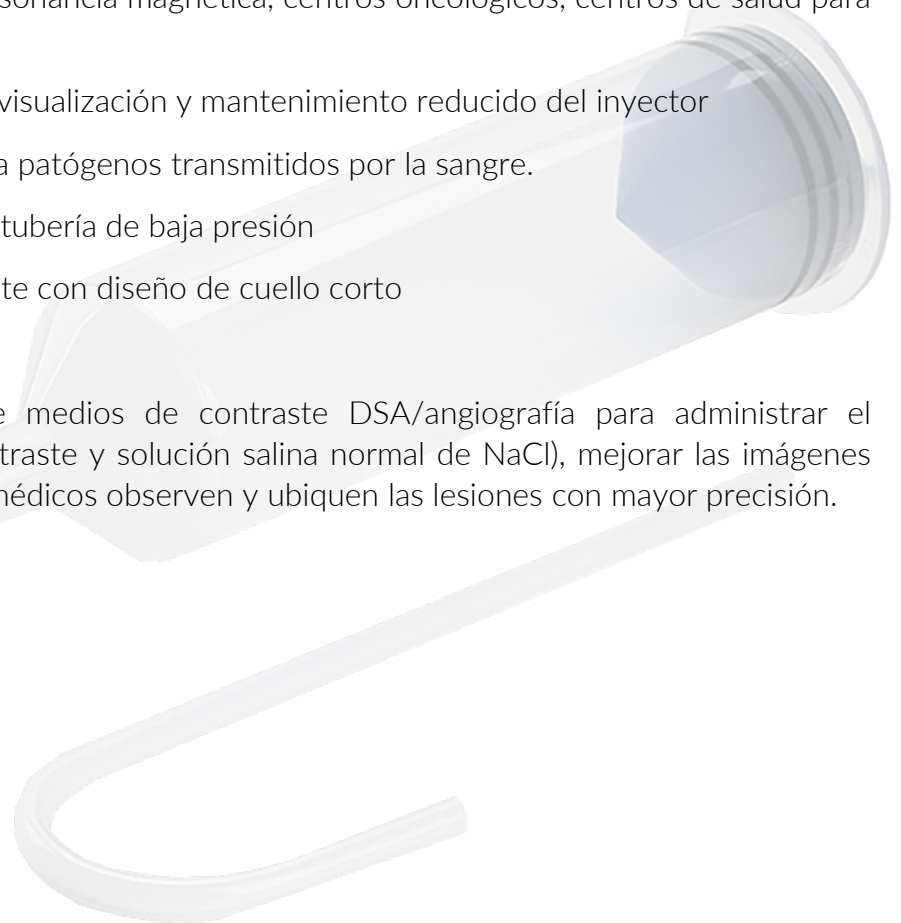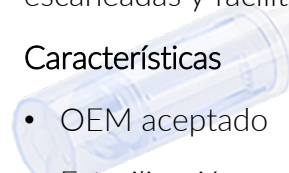

SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit Jeringa 150 ML QFT 150-FT-Q



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad®
USAR CON	Medrad Mark V, Mark V plus y Mark V provis
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	Syringe



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit Jeringa Para Salient SPK LA ZY6323

El ZY6323 es un kit de jeringas para el sistema de inyección Medrad® Salient®. El kit contiene 1 jeringa de 190 ml y un spike.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit Jeringa Para Salient SPK LA ZY6323



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Twist & Go™
USAR CON	Medrad® Salient
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	Syringe



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.


Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit Mark VII Arterion 150 ML ART 700 SYR

Jeringa angiográfica Medrad® Twist & Go™ ART 700 SYR de alta presión desechables de 150 ml para el sistema de inyección Medrad Mark VII 7 Arterion.

- La jeringa desechable Medrad® Twist & Go™ también se configura con una sola mano, para una conexión rápida y simplificada del tubo.
- Las diversas longitudes de tubería del conector de alta presión (HPCT) permiten flexibilidad en la colocación y configuración del inyector.
- Estéril y desechable.
- 100% de ajuste
- OEM aceptado
- Esterilización con gas
- Libre de látex
- Presión máxima de 350psi
- Un solo uso

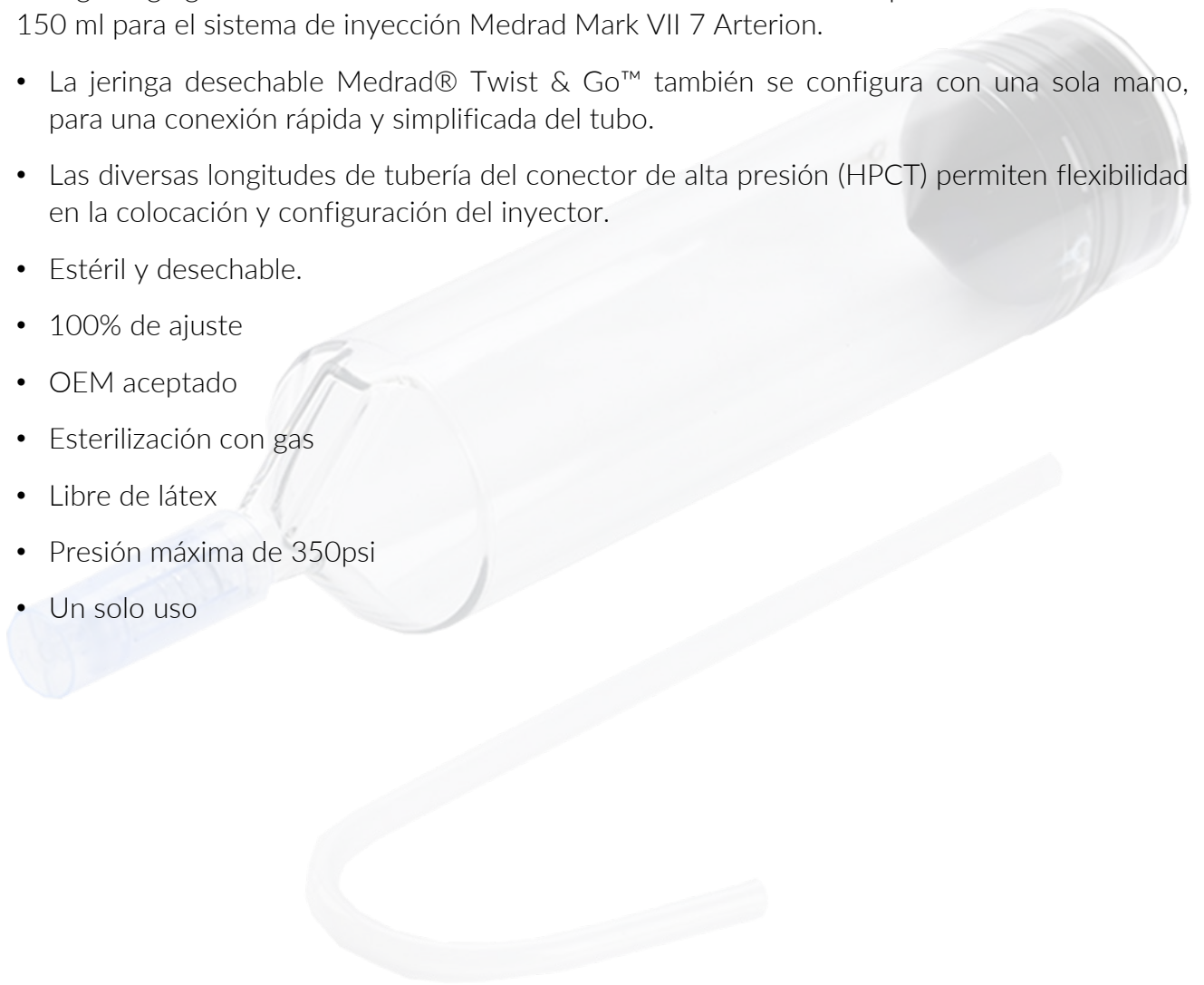

SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit Mark VII Arterion 150 ML ART 700 SYR



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Twist & Go™
USAR CON	Medrad® Mark 7 Arterion
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	Syringe



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Multi Patient AVA 500 MPAT MEDRAD® Avanta

Kit compuesto por jeringa multi paciente con capacidad de 150 ml, sistema de inyección multi paciente para la administración de fluidos. Reutilizable hasta por 5 pacientes (en un solo día).

Jeringa

Jeringa 150 ml.

Conector roscado.

Sistema inyección

- Cuentagotas cónicos - 2 uds.
- Adaptador Luer - 4 uds.
- Adaptador con protección Luer con válvula de retención de alta presión.
- Válvula de cierre de tres posiciones.
- Tubo espiral 19" diagonal: 0,160".
- Diámetro del tubo de 9,8": 0,162".
- Diámetro del tubo de 13": 0,160".
- Diámetro del tubo de 6,25": 0,160".
- Diámetro del tubo de 25": 0,172".
- Diámetro del tubo de 3,95": 0,160".
- Aguja sin válvula de aire.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Multi Patient AVA 500 MPAT MEDRAD® Avanta



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® AVA 500 MPAT
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CT Multipack Syringe



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Single Use Display Control Unit Sheath AVA 500 DCOV

El AVA 500 DCOV es una funda estéril de un solo uso para la unidad de control de pantalla Medrad® Avanta™. Ayuda a mantener un ambiente estéril en un laboratorio de cateterización o en cualquier procedimiento que utilice el sistema de inyección de administración de fluidos Medrad® Avanta™.



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad®
FABRICANTE:	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Single Use Hand Controller Sheath AVA 500 HCS

AVA 500 HCS es una funda de un solo uso para el controlador de mano para el sistema de inyección de fluido Medrad® Avanta™. La funda de un solo uso ayuda a mantener un ambiente estéril durante los procedimientos médicos de intervención. Permite usar un controlador de mano Medrad® Avanta™ (AVA 500 HC) para hasta 5 pacientes simplemente reemplazando la funda para cada nuevo paciente.



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Single Use Hand Controller Sheath AVA 500 HCS
FABRICANTE:	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Transfer Set Simple para Tomografía Computada CVTS

Sistema de carga a través de válvula de control, compatible con cualquier inyector de medios de contraste para Tomografía, con un filtro antirreflujo y doble válvula. También compatible con equipos de inyección resonancia magnética (Spectris Solaris).



INFORMACIÓN

COMPATIBLE:

Inyectores de medios de contraste para Tomografía | inyector de medios de contraste para Resonancia Magnética (Spectris Solaris EP MR).

FABRICANTE:

Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Tubo conector de baja presión 152.4 cm LPDCT-160

Tubo conector de PVC de baja presión para Inyector de material de contraste y soluciones compatible con cualquier marca de inyectores de Resonancia Magnética y Tomografía. Estéril y desechable.



INFORMACIÓN

FABRICANTE:	Bayer Healthcare
APLICACIÓN:	Low Pressure Tubing
LONGITUD:	60" (152.4cm)



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Tubo conector en «T» de baja presión 96" SSIT 96VLD

Tubo conector de baja presión en "T" para inyector de material de contraste y soluciones compatible con cualquier marca de inyectores de Resonancia Magnética y Tomografía.

Estéril y desechable.



INFORMACIÓN

FABRICANTE:

Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Tubo Extensión Dual, LA ZY5152

Tubo de extensión con conector en T para sistema de inyección CT MEDRAD Salient D. Estéril desechable con un conector en T a un contenedor de polímero desechable estéril para sustancias radiopacas a un sistema de inyección.

Unidades de terminación: tubería de presión con conector en T.

Longitud del tubo: 150 cm.

Diámetro del tubo interior: $0,060 \pm 0,002$ pulgadas

Diámetro del tubo exterior: $0,100 \pm 0,002$ pulgadas

Material del conector y del tubo: PVC

Presión máxima de diseño, no menos de 300 psi

Tasa límite de inyección de agente de contraste, no menos de 10,0 ml/s.

Vida útil a partir de la fecha de esterilización, no menos de 4 años

Esterilización, fábrica (óxido de etileno)

Envasado individual, estéril.




MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Tubo Extensión Dual, LA ZY5152

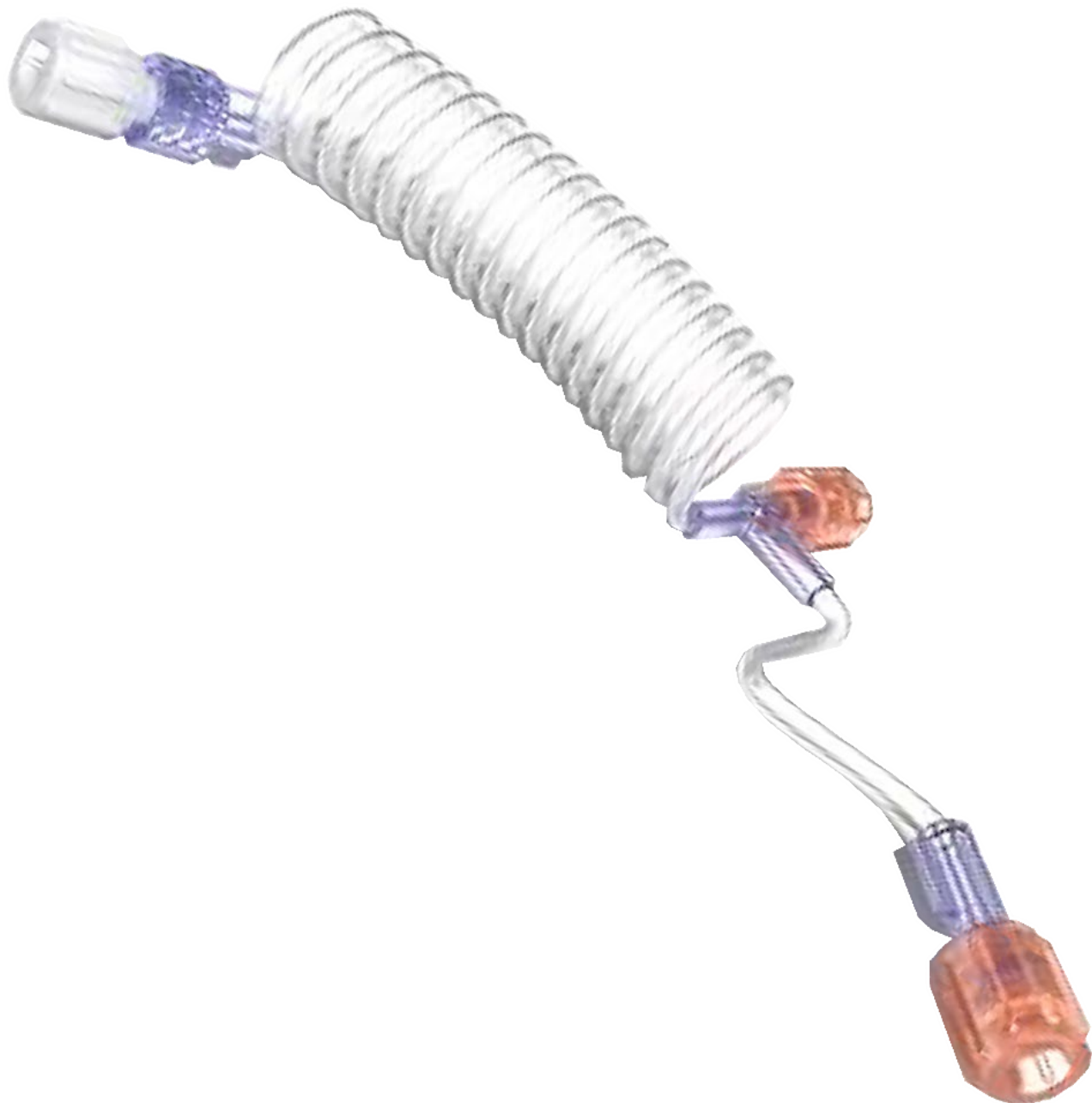

INFORMACIÓN

FABRICANTE:

Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369