



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

DRYSTAR 5302



Impresora Digital con
películas de dos formatos

Línea: Radiología / Impresoras



DRYSTAR 5302

Impresora DRYSTAR 5302

Cuando desee una impresora de imágenes en papel para el día a día que satisfaga todas sus necesidades de procesamiento de imágenes, no busque más allá de la DRYSTAR 5302. Su diseño robusto admite una larga vida útil y un funcionamiento confiable, mientras que las dos bandejas en línea y el tamaño de la mesa brindan un rendimiento óptimo. flexibilidad y usabilidad. Se ajusta donde usted lo desee y se adapta a sus necesidades de procesamiento de imágenes, brindando una respuesta asequible y confiable a sus requisitos de impresión CR/DR. Además, obtiene todas las valiosas funciones de la familia DRYSTAR, incluida la galardonada tecnología Direct Digital Imaging (DDI) mejorada con A#Sharp de Agfa; operación y mantenimiento ecológicos y fáciles; y una integración DICOM native sencilla. DRYSTAR 5302 es la solución flexible para sus tareas diarias.

LA DRYSTAR 5302 ES UNA IMPRESORA DIGITAL DIRECTA CON PELÍCULAS DE DOS FORMATOS.

Excelente fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Técnica de formación directa de imágenes digitales.

Impresión cómoda a con dos formatos de película en línea.

Carga fácil a la luz del día.

Excelente fiabilidad y mínimo mantenimiento.

La DRYSTAR 5302 ofrece todas las ventajas de la formación Directa de Imágenes Digitales. Esta tecnología ampliamente experimentada evita el uso de complejos componentes ópticos y su diseño hace de la impresora un elemento clave y duradero. Además, la DRYSTAR 5302 es ecológica y fácil de utilizar. Se acabó el revelado húmedo, los cuartos oscuros, los ajustes complicados o las labores de limpieza. Los productos químicos nocivos así como los costes de manipulación y eliminación de los residuos ya son cosa del pasado.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



DRYSTAR 5302

Fácil conexión para máxima flexibilidad.

La DRYSTAR 5302 es una impresora original DICOM, lo cual facilita la conexión a la red. Para una conexión punto a punto con modalidades no DICOM, la DRYSTAR 5302 puede utilizarse con LINX Paxport de Agfa HealthCare.

Dos formatos de película en línea.

A pesar de su tamaño compacto, la DRYSTAR 5302 integra dos formatos de película en línea, con 5 formatos de película disponibles. Por lo tanto, la impresora ofrece mayor flexibilidad y comodidad, puesto que ya no es necesario cargar cada vez un nuevo formato de película para distintos tamaños de imagen. Gracias a su tiempo de acceso a la primera película especialmente reducido y su rendimiento de 75 hojas por hora (14 x 17 pulgadas), la DRYSTAR 5302 ofrece a la vez flexibilidad y mayor flujo de trabajo en casi todas las aplicaciones de radiología.

Impresión al lado de la aplicación.

El pequeño tamaño de la unidad permite instalarla cómodamente próxima a las aplicaciones, incluso en lugares con espacio muy reducido. La libertad de colocación que ofrece la DRYSTAR 5302, combinada con la baja inversión y el reducido coste de mantenimiento, convierte esta impresora en el complemento perfecto para numerosas modalidades.

Una solución completa e instantánea.

Combinando de forma inteligente la técnica de formación Directa de Imágenes Digitales, la película y el dispositivo de formación de imágenes, la DRYSTAR 5302 ha sido ideada para ocupar el corazón de la solución integrada de Agfa HealthCare. Combinada con la película de concepción avanzada DRYSTAR DT2, genera día tras día copias impresas con niveles de gris para diagnósticos de la más elevada calidad. Por ser sensible al calor, en lugar de ser fotosensible, la DT2 puede cargarse, además, a plena luz del día.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



DRYSTAR 5302



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



DRYSTAR 5302



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Generalidades

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones (Lo x Pr x Al)	72,8 x 71,5 x 53,6 cm (Al = 67,6 cm sin bandeja de salida)
Peso (sin película)	90kg
Alimentación eléctrica	Selección automática: 100 - 240 V: 50/60 Hz
Consumo de energía	Impresión: 250 vatios Máximo: 530 vatios En modo de espera: 70 vatios
Capacidad de la bandeja de suministro de película	100 hojas por bandeja
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 15 - 30 ° Humedad: 20 - 75% HR, sin condensación
Condiciones de almacenamiento y transporte	* Temperatura: entre -25 y +55 °C entre -40 y +70 °C durante el transporte * Humedad: 10 - 95% HR, sin condensación
Disipación térmica	Potencia en modo de espera: 70 vatios Potencia media imprimiendo: 250 vatios Potencia máxima: 530 vatios
Seguridad	IEC 60601-1

Prestaciones

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Rendimiento	8 x 10 pulgadas: 130 hojas/hora (28 seg. por placa) 11 x 14 pulgadas: 86 hojas/hora (42 seg. por placa) 14 x 17 pulgadas: 75 hojas/hora Tiempo de acceso 1ra película: 77 seg., aproximadamente (14 x 17 pulgadas - 12-bits)
Zona de diagnóstico	8 x 10 pulgadas: 2376 x 3070 pixeles 10 x 12 pulgadas: 3070 x 3653 pixeles 11 x 14 pulgadas: 3348 x 4358 pixeles 14 x 17 pulgadas: 4358 x 5232 pixeles
Resolución de impresión	Geométrica: 320 ppp Contraste: impresión 14 bits

Película

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Tipos	Geométrica: 320 ppp Contraste: impresión 14 bits
Formatos	8 x 10 pulgadas, 10 x 12 pulgadas, 11 x 14 pulgadas, 14 x 14 pulgadas y 14 x 17 pulgadas Dos formatos en línea




SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



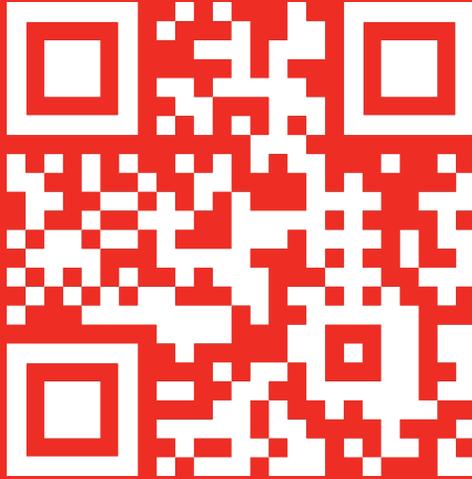

 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369