

**POSKOM**  
Imaging Innovation



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



UNIDAD DE RAYOS X POSKOM VET-20BT

Línea: Radiología / Rayos X



La unidad de rayos X portátil a batería híbrida para equinos VET-20BT es el generador híbrido a batería más ligero y compacto y la unidad de rayos X portátil más avanzada del mercado radiológico actual.

Es de nuevo diseño con microingeniería innovadora y tecnología de batería para un veterinario equino, especialmente para las doctoras. Con un peso inferior a 15 libras y un láser dual que enfoca el centro de la película de rayos X a 26" SID preestablecido, VET-20BT es la unidad de rayos X más ligera, inteligente y duradera del mercado portátil.

El nuevo controlador de software facilita la obtención de las imágenes radiográficas equinas más difíciles al tomar una sola exposición sin necesidad de volver a tomar una película radiográfica repetidamente.

La unidad de rayos X de batería híbrida Vet-20BT está integrada con un módulo de sincronización inalámbrica (opcional para DR) que se facilita mediante un dispositivo de comunicación de radiofrecuencia (RF).

La técnica PROM preestablecida, la lámpara del colimador y el puntero láser se encienden y seleccionan mediante un interruptor manual remoto antes de realizar una exposición. MA variable y 40 a 80 KV proporcionan una potencia de salida suficiente para todas las necesidades radiográficas equinas.

- Potencia Máxima (kW): 1.6
- Rango de kV: 50-90
- Rango de mA: 8, 10, 15, 20
- Rango de mAs: 0.4-20/25
- Punto focal (mm): 1.2 X 1.2
- Ángulo de objetivo: 19°
- Apuntador láser: Estándar
- Batería: 14.8V/4800 mAh
- Tiempo de recarga: 3.5 horas
- No. de APR: 15
- Peso (kg): 6.8
- Dimensiones (mm): 203x174x307

# POSKOM

Imaging Innovation



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

## MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
[www.medikrom.mx](http://www.medikrom.mx) | [ventas@medikrom.mx](mailto:ventas@medikrom.mx)  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851





# POSKOM

Imaging Innovation



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS




## MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
[www.medikrom.mx](http://www.medikrom.mx) | [ventas@medikrom.mx](mailto:ventas@medikrom.mx)  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

POSKOM   
Imaging Innovation

# POSKOM

Imaging Innovation

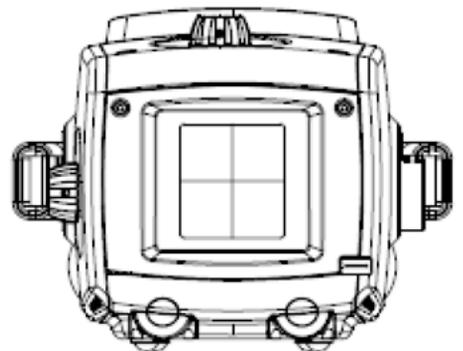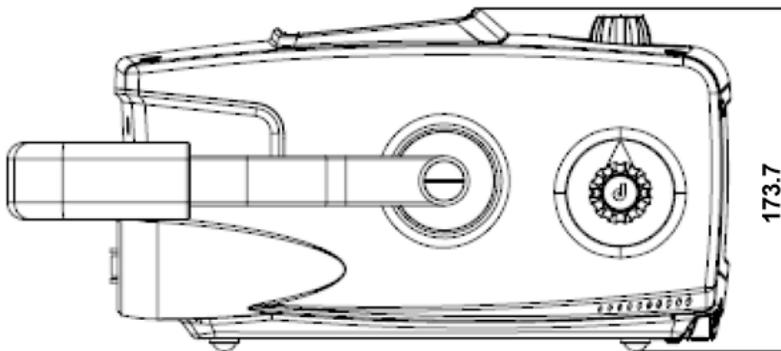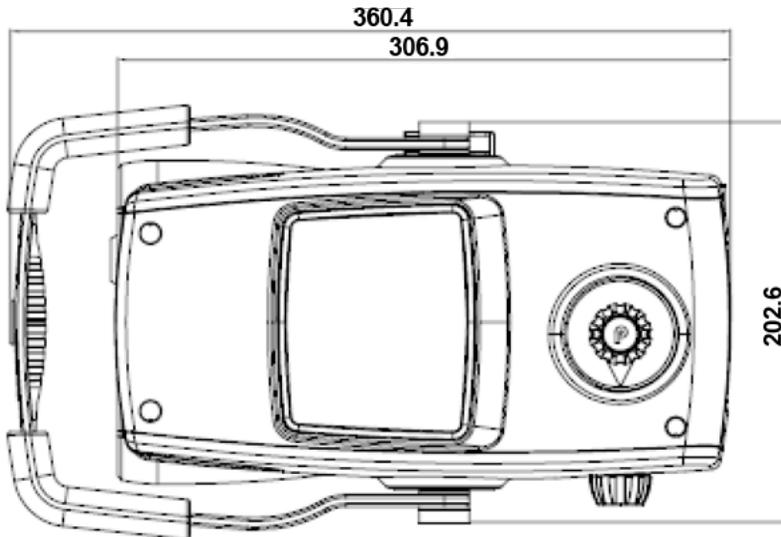

SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

## MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
[www.medikrom.mx](http://www.medikrom.mx) | [ventas@medikrom.mx](mailto:ventas@medikrom.mx)  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851





[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037  
55 1680 8851 | 777 145 3369