

SONOND



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



Ultrasonido portable | Innovador, Ultra HD

Línea: Ultrasonido

 HEALCERION

Ultrasonido inalámbrico SONON 300 C (Convexo).

El transductor SONON 300C cuenta con tecnología de punta y su software, combinado con un sensor propietario, convierte cualquier dispositivo móvil en un monitor de ultrasonido móvil con la misma calidad de imagen y perilla que una máquina tradicional sonográfica. El SONON 300C cabe perfectamente en su mano y, con poco más de 11 oz, la luz y la portabilidad le permiten escanear donde quiera que vaya. El SONON no tiene cordones ni cables, por lo que es fácil de transportar y conectar a dispositivos iOS y Android. Al admitir DICOM, la aplicación SONON le permite almacenar, administrar y transferir imágenes de forma segura a su servidor PACS en el sitio o basado en la nube. Diseñado para un turno de trabajo típico de POC, la batería de larga duración del SONON 300C lo mantiene productivo todo el día, brindando hasta 3 horas de escaneo continuo o hasta 12 horas en modo de espera.

- Diseño compacto
- Conectividad inalámbrica
- Compatible con PACS
- Autonomía prolongada de la batería
- Homologado por la FDA
- Homologado por la CE



Ultrasonido inalámbrico SONON 300 C (Convexo).



Ultrasonido inalámbrico SONON 300 C (Convexo).



CARACTERISTICA	
Frecuencia	3.5MHz
Máxima profundidad	~24cm
Peso	390g(con batería)
Dimensiones	Ancho: 78mm (7.8cm) X Largo: 219mm (21.9cm) X Profundidad: 38mm (3.8cm)
Tiempo de uso	3 horas (escaneo), 12 horas (espera)
Tiempo de recarga	3 horas (carga completa)
Conectividad	Señal inalámbrica de diseño compacto, Confirmación de casos, PUI, Seguimiento del progreso
Modo de operación	B, CF, PW, M

Ultrasonido inalámbrico SONON 300 C (Convexo).



CARACTERISTICA

Uso principal


Abdomen, Vejiga, FAST, Obstetricia, Ginecología

Ultrasonido inalámbrico SONON 300 C (Convexo).



BATERIA

Tipo	Batería recargable de iones de litio
Capacidad	2600 mAh
Tiempo de carga	3 horas (completa)
Tiempo de vida	3 horas (escaneo), 12 horas (en espera)
REQUERIMIENTOS DISPOSITIVOS	
Sistemas operativos soportados (mínimo)	Android iOS Windows Android 7.0 iOS 12 Windows10(64-bit) iOS 9.0 iPadOS 9.0
Dispositivos Android	SAMSUNG Galaxy S6 SAMSUNG Galaxy Note5, FE SAMSUNG Galaxy A5, A7 2016 SAMSUNG Galaxy J3, J5, J7 2017 SAMSUNG Galaxy Tab S3 (2017) SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 2016
Dispositivos iOS (solo Apple)	iOS (Apple only) iPhone 6s iPad 5 iPad Mini 4 iPad Air 2 iPad Pro 1

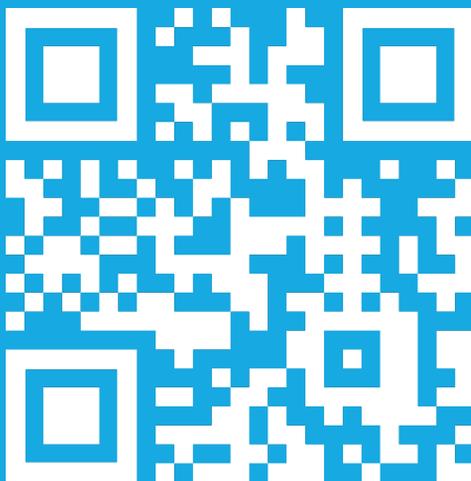

[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369